



DERMATRIX DUO

Аппарат микроигольчатой RF терапии и фракционного RF с функцией абляции тканей



DERMATRIX DUO

Методика радиочастотного термолифтинга имеет множество интерпретаций: моно-полярный RF, мульти-полярный и фракционный, «термаж». Какой самый эффективный и функциональный?

На сегодняшний день лидером среди методов RF терапии является – **Игольчатый RF**. Где в качестве электродов выступают изолированные специальные иглы. По сравнению с обычными аппаратами RF, данный метод имеет большее количество показаний и дает более выраженные результаты.

А также запросом многих специалистов и клиентов был метод: «менее агрессивный, чем лазер» и «более эффективный, чем обычный RF». Такими качествами обладает **Аблятивный RF**. Метод позволяет проводить глубокий прогрев, как RF и частичную абляцию, как фракционный лазер.

Аппарат **DERMATRIX DUO** сочетает в себе 2 самых эффективных метода RF, что делает его наиболее эффективным аппаратом радиочастотного лифтинга на рынке!




MICRO NEEDLE RF

Манипула MICRO NEEDLE RF: Благодаря проникновению микроиголок в глубокие слои дермы, возможно воздействовать на волокна коллагена. Под влиянием температуры белок сворачивается, приобретая первоначальную структуру, обеспечивая подтяжку овала. Помимо влияния генерируемых радиочастотных импульсов, которые нагревают кожу до 40°–42°, аппарат производит микротравмы. Это позволяет запустить процессы обновления, создания новых эластиновых, коллагеновых цепочек.




DERMATRIX DUO

Principle of mechanical motion

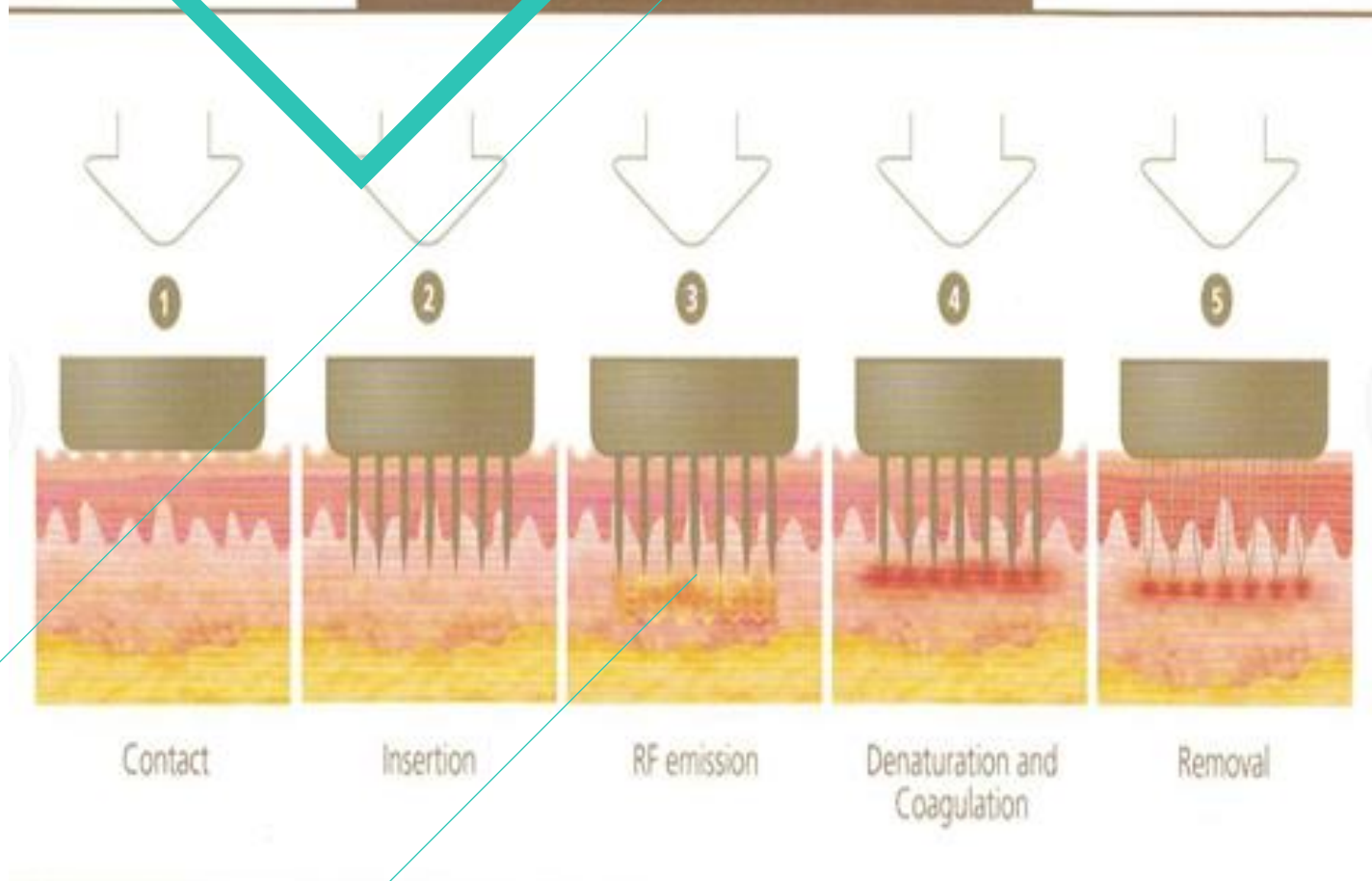

ПРИНЦИП РАБОТЫ MICRO NEEDLE

MICRO NEEDLE 3D

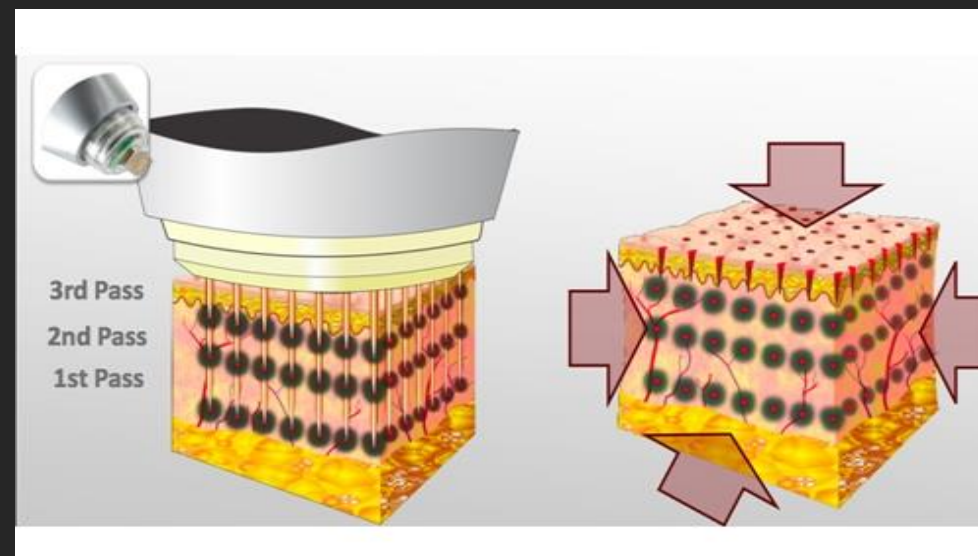

Запатентованная технология позволяет вводить иглы в ткани последовательно на разную глубину: от 0,5 мм до 3,0 мм, тем самым обеспечивая эффект 3D лифтинга тканей.

Показания к применению MICRO NEEDLE:

- смещение линии овала, появление брылей, второго подбородка;
- нависшие веки, мешки под глазами;
- гусиные лапки, кисетные морщины;
- серый, нездоровый цвет;
- наличие сеточки неглубоких складочек, дряблость покровов;
- усиленная жирность кожи, комедоны, расширенные поры;
- шрамы, пятна, следы постакне;
- угревая сыпь.



DERMATRIX DUO

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАНИПУЛЫ MICRO NEEDLE

Мощность вход.: 200W

Частота: 1.15MHz

Выходная мощность: 36W

Длительность импульса: 10--1000ms

Интервал ипульсов: 0ms, 200ms, 400ms,
600ms, 800ms

Насадки: 49 иглы (8*8mm) 16 игл(4*4mm)

Глубина: Max 3.0mm



РЕЗУЛЬТАТЫ
РАБОТЫ
МАНИПУЛЫ

MICRO NEEDLE

Before



Treatment session: 5

After



Treatment session: 5



РЕЗУЛЬТАТЫ
РАБОТЫ
МАНИПУЛЫ

MICRO NEEDLE

Before



Treatment session: 5

After



Treatment session: 5



РЕЗУЛЬТАТЫ
РАБОТЫ
МАНИПУЛЫ

MICRO NEEDLE

Before



Treatment session: 5

After



Treatment session: 5



МАНИПУЛА FRACTIONAL RF



Принцип действия DERMATRIX основан на частичной травматизации структурных основ дермы, в то время как эпидермис страдает в меньшей степени. В период фазы восстановления начинается активная регенерация поврежденных структур, воссоздается каркас кожи из молодых коллагеновых волокон. В результате под действием DERMATRIX обновляется не только поверхностный слой кожи, но и запускаются все внутренние обменные процессы в клетках.



ПРЕИМУЩЕСТВО FRACTIONAL RF




Действие аппарата основано на действии высокочастотным током в фракционном режиме. DERMATRIX имеет сменный аппликатор с 64 точечными излучателями, которые под действием тока создают термальные микро-зоны. Отличительная особенность DERMATRIX от других систем фракционной абляции тканей в том, что тепло поглощаемое тканями не концентрируется в зоне абляции, а за счет радиочастотного воздействия глубоко распространяется глубоко и прогревает все слои дермы.

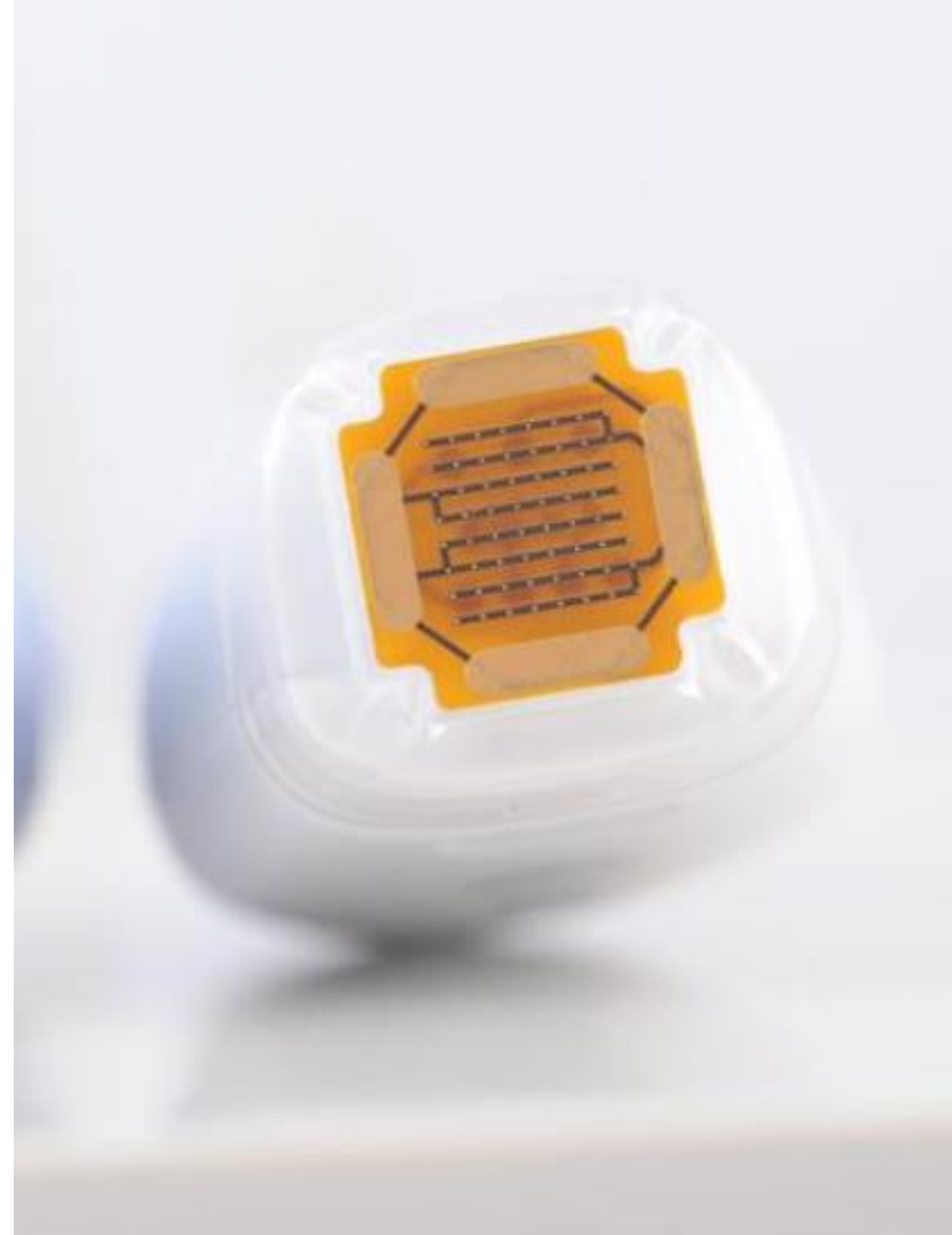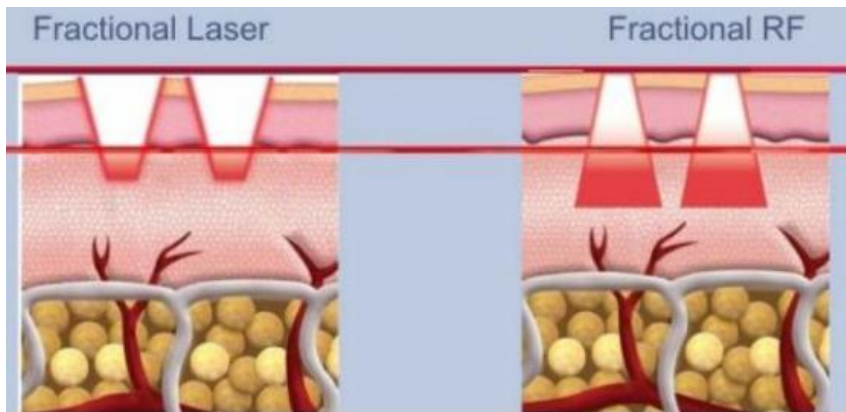

DERMATRIX или LASER

Учитывая дополнительный прогрев дермы за счет радиочастотного воздействия, абляция микро-зон не является такой же агрессивной, как, например, при лазерном воздействии. Этот факт сокращает период реабилитации, делает процедуру максимально комфортной и позволяет работать с клиентами вне зависимости от фототипа кожи. Врачу представляется возможность проводить процедуру всесезонно.

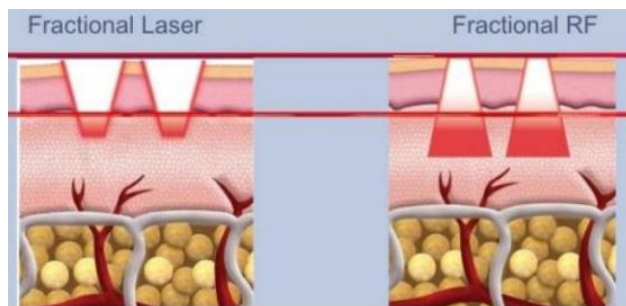

СРАВНЕНИЕ DERMATRIX

С другими
Радиочастотными
технологиями

Технология	Традиционный RF	Фракционный лазер		Фракционный RF
		Абляционный	Не-абляционный	
Механизм работы	Энергия RF стимулирует выработку коллагена и эластина, способствует регенерации старых волокон	Абляционный фракционный лазер работает по методу высокой степени абляции в выбранной зоне. Работая фракционно, лазер создает микро-зоны подавая в них луч лазера и вызывая полную абляцию в данных зонах. За счет травматизации тканей, происходит регенерация и восстановление, также запускается процесс выработки новых коллагеновых волокон	Не-абляционный лазер работает во фракционном режиме в определенно выбранной зоне, создавая микро-зоны, лазер нагревает дермис, но не создавая абляцию. По действием лазера запускается процесс восстановления коллагено-эластиновых волокон	Фракционный Rf передает тепло на более глубокие слои дермы, для запуска регенерации коллагеновых волокон. А также обладает свойством абляции (но меньшим чем при CO2 лазере) что позволяет также бороться с пост-акне, рубцами, выравнивать кожу
Подходящие для работы фототипы кожи	I – VI	I – IV	I – V	I – VI
Глубина проникновения	Дермис	Дермис и Эпидермис	Дермис и Эпидермис	Дермис и Эпидермис
Клинические результаты	Регенерация тканей, удаление морщин, потяжка	Шлифовка	Омоложение, регенерация, удаление шрамов	Омоложение, удаление морщин, удаление шрамов и рубцов, подтяжка, уменьшение пор
Эффективность	Средняя	Хорошая	Хорошая	Превосходная
Период реабилитации	Нет	2–3 недели	7–10	1–3
Комфорт	Комфортно	Болезненно	Менее болезненно	Комфортно



DERMATRIX DUO

FRACTIONAL RF



Технические характеристики:

Входная мощность: 200W


Частота: 1.15MHz

Длительность импульса: 130--150ms

Размер насадки: 21mm*21mm

Насадка: 64 точки

Энергия: 11 mj/pin-142 mj/pin

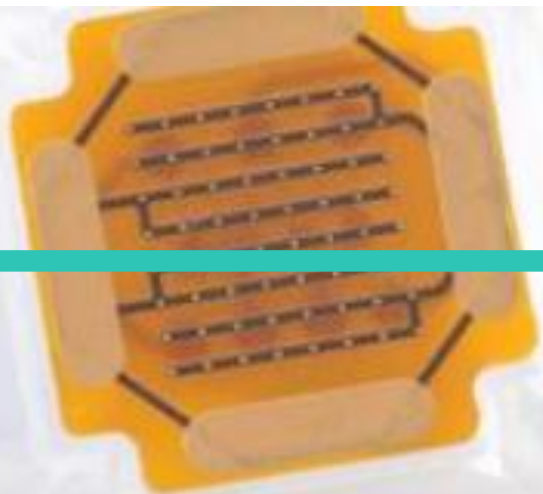



РЕЗУЛЬТАТЫ
РАБОТЫ
МАНИПУЛЫ

FRACTIONAL RF





РЕЗУЛЬТАТЫ
РАБОТЫ
МАНИПУЛЫ

FRACTIONAL RF





РЕЗУЛЬТАТЫ
РАБОТЫ
МАНИПУЛЫ

FRACTIONAL RF





MIDIS Medical Dermatology Systems
www.midis-centr.ru

КОНТАКТЫ

«Центр Медицинской Косметологии «Мидис»

Сайт:

<http://www.midis-centr.ru/>

www.coolite.ru

www.elpis-fx.ru

www.contlex.ru

Телефоны: 8(800)600-76-59

**Адрес: Адрес офиса и шоу-рум: БЦ Румянцево, Подъезд 4,
Помещение 413А, офис 12**

Все материалы презентации: включая текстовую, графическую и видео информацию, структуру и оформление страниц, защищены российскими и международными законами и соглашениями об охране авторских прав и интеллектуальной собственности (статьи 1259 и 1260 главы 70 "Авторское право" Гражданского Кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 года N 230-ФЗ).
Все материалы запрещены к копированию!



Центр МИДИС
Эксклюзивный
Дистрибьютор
Оборудования для
Салонов красоты и
Центров эстетической
Медицины

С 1991 года



ОБУЧЕНИЕ



СЕРВИС



РАССРОЧКА



ПОДДЕРЖКА