



Официальный дистрибьютор на территории РФ:
WWW.MIDIS-CENTR.RU

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
МИДИС

ULTRALITE

Аппарат свето-импульсной терапии IPL с технологией квадратного
Импульса и автоматической калибровкой сигнала

MIDIS



GSD

Ultralite

Square Pulse IPL (SHR)




ULTRALITE



Ultralite обладает технологией квадратного импульса IPL для того чтобы обеспечить постоянную и ровную поставку энергии к коже для оптимальной клинической обработки. Запатентованная регулируемая система охлаждения ТЕС, обеспечивает минимальную температуру -4°C , безопасна и удобна в эксплуатации и защищает кожу. Функция калибровки энергии делает выход энергии более точным и стабильным.


Квадратный импульс IPL

Процедура становится более комфортной и безопасной, а энергия полностью проникает в глубокие слои кожи. При этом энергия не будет ослаблена в течение всего импульса. Зарядная энергия всегда стабильна при постоянном напряжении. ULTRALITE использует датчик для контроля разрядного тока в режиме реального времени, для обеспечения стабилизированного напряжения тока и ровного выхода энергии. Снижение энергии при импульсе, как в обычных аппаратах IPL, практически отсутствует. Наконечник имеет более длительный срок службы.

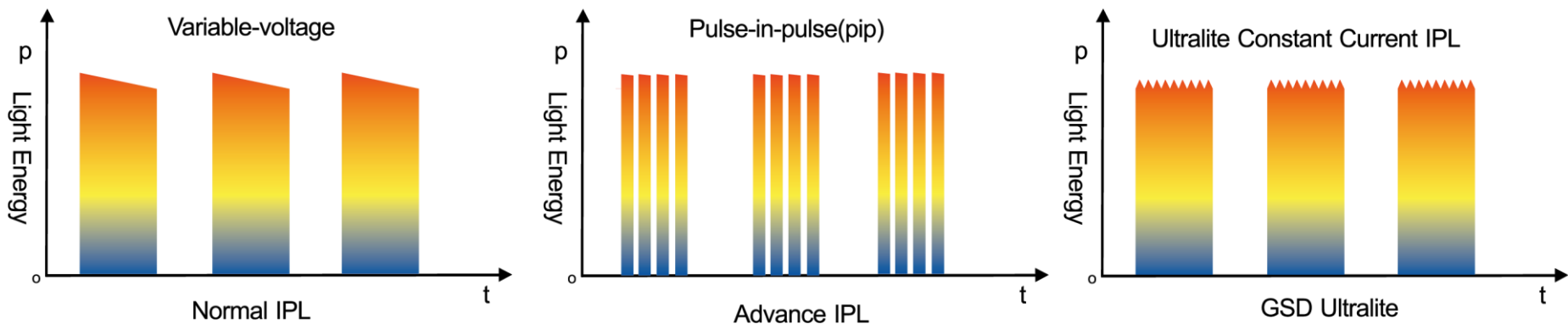


Преимущества


**Большой размер рабочей поверхности
с ровным распределением энергии**

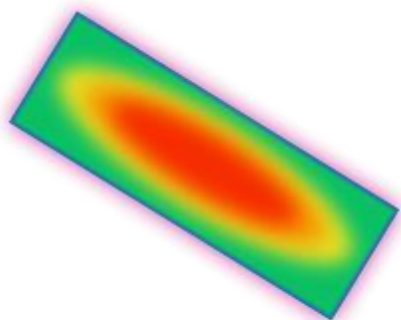

Normal IPL device

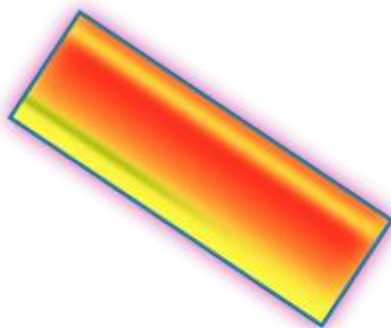

Advanced IPL device

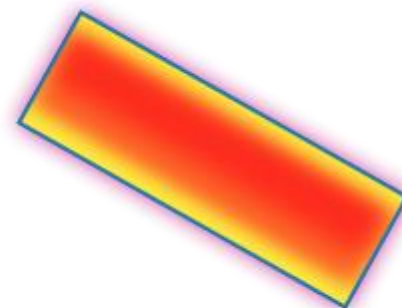

Ultralite

Большой размер пятна 15x50mm, значительно улучшает терапевтическое воздействие, равномерный выход световой энергии обеспечивает комфорт и безопасность во время процедуры, и избегает рисков ожогов, как при традиционном IPL с неравномерным распределением энергии. Система UTRALITE обеспечивает эффективность и высокое качество процедуры.

Преимущества


Инновационная система охлаждения ТЕС, обеспечивает более высокую производительность охлаждения и стабильность



Ultralite воздействует на кожу




Меланин в фолликуле поглощает свет, а энергия света превращается в тепловую энергию

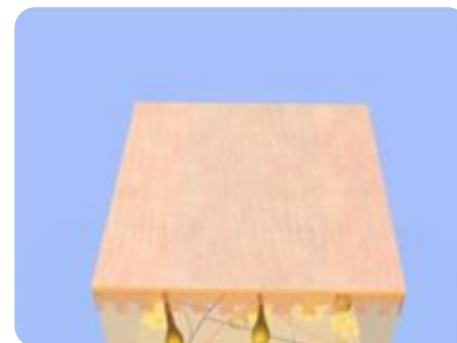

Волосы удалены

Система охлаждения ТЕС имеет полупроводниковое охлаждения сапфира, охлаждение происходит намного быстрее и дольше. Самая низкая температура -4°C , что действительно делает процедуру максимально безболезненно и безопасной .



Запатентованная технология RVC (калибровки импульса)

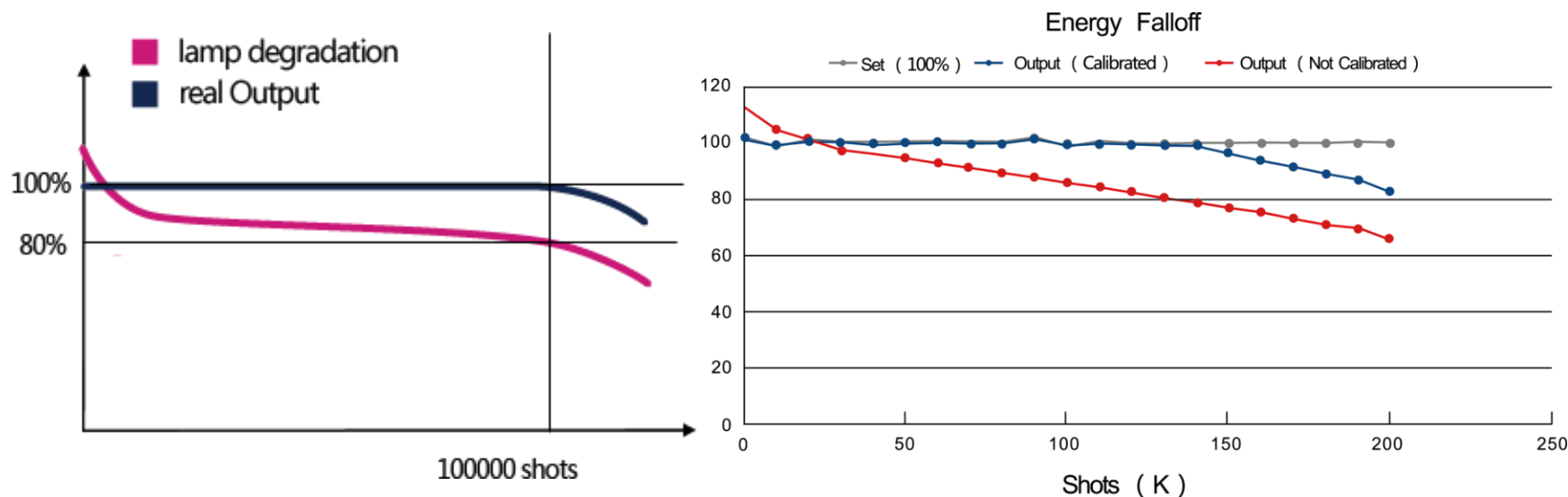

Ресурс лампы увеличивается без какого-либо ослабления энергии. Высокоэффективный энергетический калибровочный контроль лампы, обеспечивает длительный срок службы оборудования и предотвращает снижение энергии. Данные показывают, что энергия почти не снижается после 100 000 выстрелов .


SHR
technology
(SHR)

Преимущества

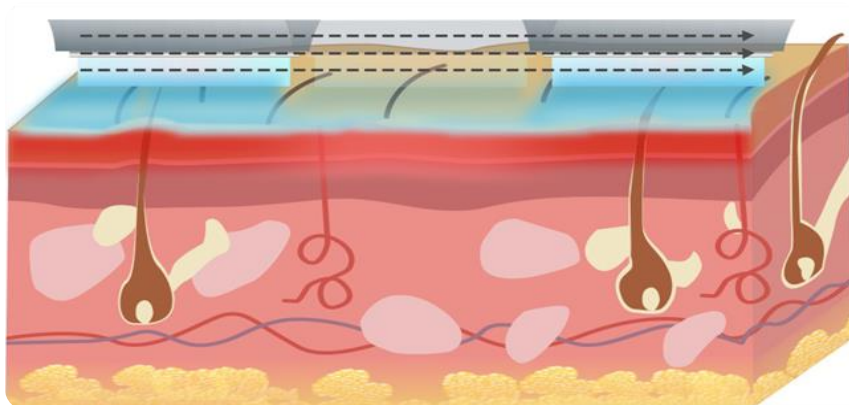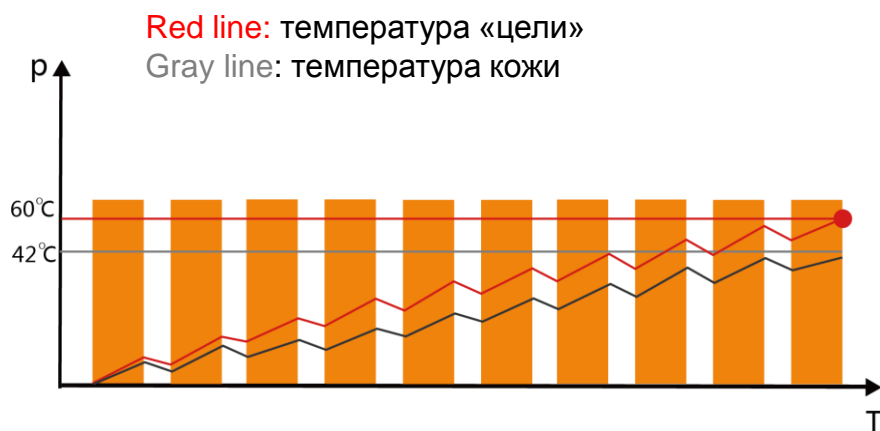


ULTRALITE равномерно высвобождает энергию через высокую частоту (максимальная частота до 10 Гц), при одинаковом времени разряда, постоянном интервале импульсов, обеспечивается фактическая выходная энергия каждого пятна стабильной, равномерной, удобной и безопасной. С системой охлаждения ТЕС и технологией работы в динамике удобно проводить процедуры удаления волос и омоложения кожи, эффективно и без рисков для нагрева эпидермального слоя.


3 режима работы для удобства использования

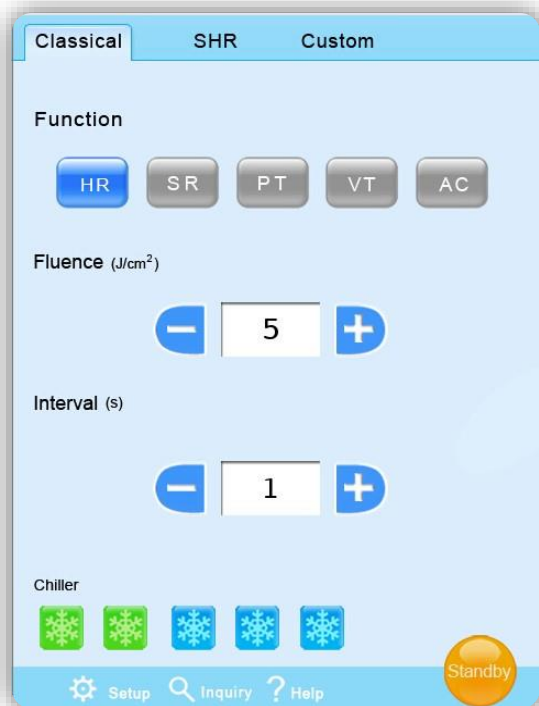

Классический

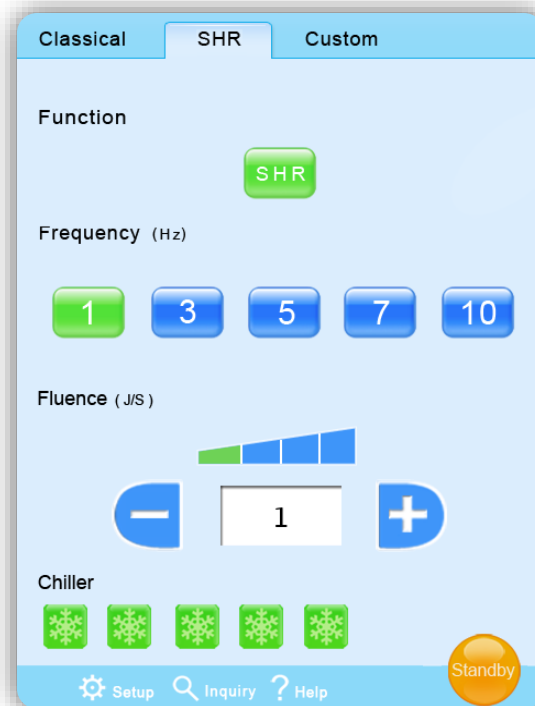

SHR режим

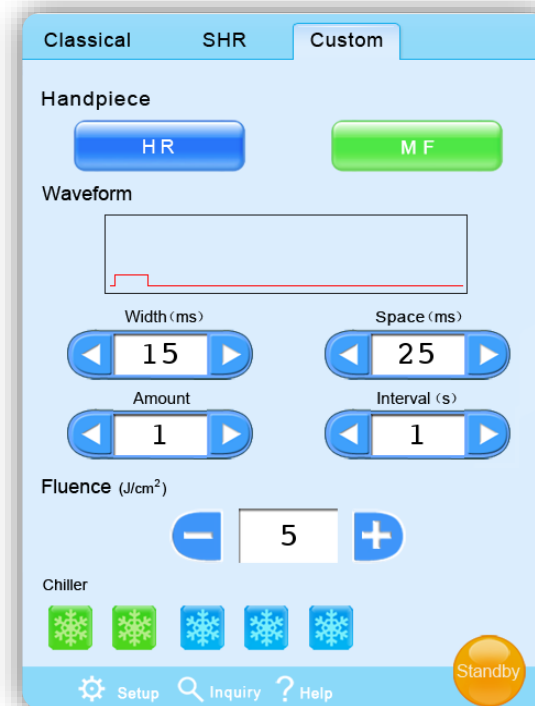

Ручная настройка



Технические параметры


Манипула	SHR	MF
Функции	Эпиляция / Омоложение Режим работы «в динамике»	Омоложение Лечение Акне Удаление пигментации Удаление сосудов
Размер пятна	15x50mm	10x50mm
Длина волны	600-1200nm	500-1200nm
Ресурс	600 000	200 000

Технические параметры

Ultralite

Время непрерывной работы	12 часов
Размер пятна	15x50mm (HR/SHR) , 10x50mm (MF)
Частота	Up to 10Hz
Охлаждение	TEC contact cooling
Длина волны	600-1200nm (HR/SHR) 500-1200nm (MF)
Энергия	Up to 24J/cm ²
Ширина импульса	1-25 ms , Max 4 pulses
Режимы работы	Классический режим, ручная настройка , SHR режим
Габариты	466X455X1024mm

Результаты

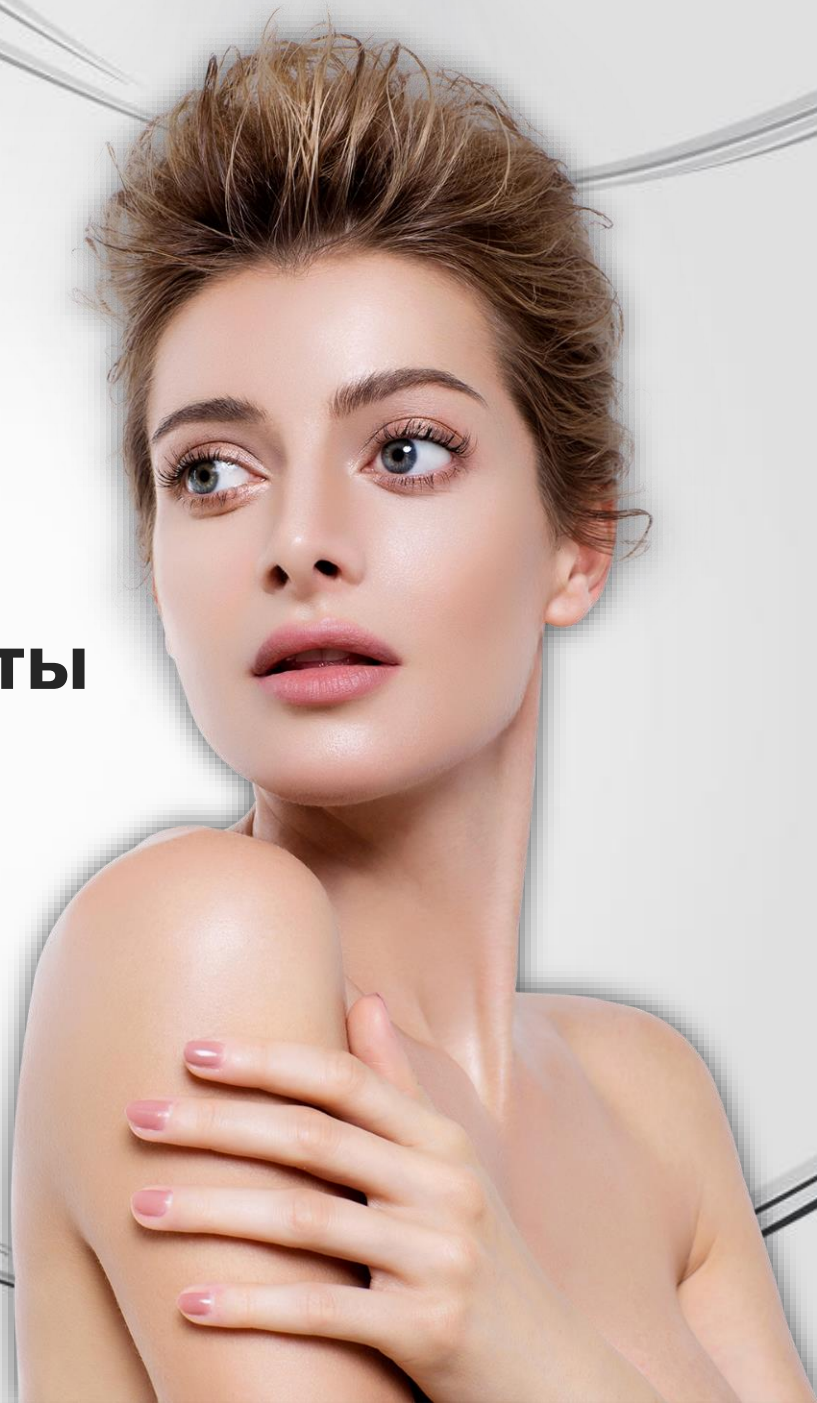

Процесс процедуры



1
Очищение




3
Очищение манипулы



5
Очищение кожи



2
Удаление волос /
подготовка

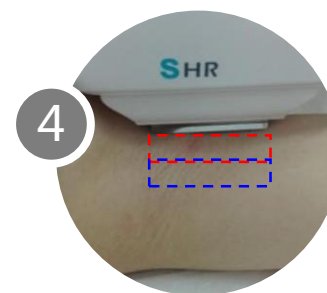

4
Обработка зоны с
использованием геля

Результаты:



Before



After 3 times treatment

Результаты:



Before



After 3 times treatment

Результаты:



Before



Arm: after 4 times treatment

Результаты:



Before



Arm: after 5 times treatment

Результаты:



Before



Calf: after 5 times treatment

Результаты:



Before



Lips : after 3 times treatment

Результаты:



Before



Fingers: after 3 times treatment

Процесс процедуры



Омоложение

Результаты:



Before



After 3 times treatment, skin become smoothy,
Black rim of the eye, eye bags obviously
fade.

Результаты:



Before



After 2 times treatment
the skin becomes much whiter and smoothy

Омоложение

Результаты:



Before



After 2 times treatment
the skin of the nose is much
whiter, skin permeability is
enhanced.

Процесс процедуры



Лечение акне

Результат:



Before



After treatment
acne are reduced

Удаление пигментации

Процесс процедуры:



Удаление пигментации:

Результат:



Before



After 2 times treatment
plaque obviously reduce

Удаление пигментации:

Результат:



Before



After one time treatment
plaque obviously reduce

Удаление пигментации:

Результат:



Before



After 2 times treatment
plaque obviously reduce

Удаление пигментации:

Результат:



Before



After one treatment
plaque obviously reduce

Удаление пигментации:

Результат:



Before



After 3 times treatment
nose's plaque obviously reduce

Удаление сосудов

Процесс процедуры:



Удаление сосудов

Результат:



Before



After 4 times treatment
redness reduce
skin become whiter

Удаление сосудов

Результат:



Before



After 3 times treatment
redness reduce. Skin
become whiter

Удаление сосудов

Результат:



Before



After 3 times treatment
redness reduce



MIDIS Medical Dermatology Systems

www.midis-centr.ru

КОНТАКТЫ

«Центр Медицинской Косметологии «Мидис»

Сайт: <http://www.midis-centr.ru/>

Телефоны:
8(800)600-76-59,

midis@midis-centr.ru

Адрес: Москва, БЦ Румянцево, Подъезд 4, Этаж 4, офис 12

Все материалы презентации: включая текстовую, графическую и видео информацию, структуру и оформление страниц, защищены российскими и международными законами и соглашениями об охране авторских прав и интеллектуальной собственности (статьи 1259 и 1260 главы 70 "Авторское право" Гражданского Кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 года N 230-ФЗ).

Все материалы запрещены к копированию!



Центр МИДИС
Эксклюзивный
Дистрибьютор
Оборудования для
Салонов красоты и
Центров эстетической
Медицины

С 1991 года

ОБУЧЕНИЕ

СЕРВИС

РАССРОЧКА

ПОДДЕРЖКА