



V8C2

АППАРАТ ВАКУУМНО-РОЛИКОГО МАССАЖА
RF И IR ТЕРАПИИ

V8C2

+

MIDIS



V8C2

Вакуумно-роликовый массаж или - одна из самых распространенных процедур в салонах красоты. Для данной процедуры нужен специализированный аппарат, на котором благодаря специализированным насадкам, осуществляется работа.

Главной целью процедуры является лечение целлюлита и формирование четкого контура тела. Эффект вытягивания кожи, за счет вакуума, улучшает кровоток и увеличивает впитываемость полезных веществ. При этом происходит ускорение обмена веществ и метаболизма.

Использовать для данной процедуры и необходимого эффекта нужно только профессиональное оборудование. От мощности аппарата зависит и эффективность, конечно, важен уровень специалиста, нужно, чтобы массажист прочувствовал тип кожи и ее плотность, и исходя из этого подобрал подходящую нагрузку для эпидермиса.

Если массажист отдаст предпочтение высокому уровню вакуума, то у клиента возникнут болевые ощущения и отеки после процедуры, этого быть не должно, с другой стороны при низкой нагрузке пациент может не почувствовать сам массаж, и результат будет минимальный. Массаж должен быть чувствительным, но не болезненным. Поэтому перед процедурой необходимо пройти тест на установление силы нагрузки на тело. Представленный аппарат является идеальным спутником для работы с клиентами в целях коррекции фигуры.



ЧТО НОВОГО?

Модель V8C2 является улучшенной версией аппарата V8C1. Аппарат сохранил все функции, но стал надежнее (автоматическая система очистки), тише (уровень шума не более 55дБ) и мощнее 90 кГц.

*** Используется запатентованная технология ALUMA фирмы LUMENIS (США) и технология VELASHAPE от компании Syneron (Израиль).**





ФУНКЦИИ V8C1

- **Биполярный RF** - 3 частоты RF: Регулируемая глубина проникновения: глубокая, средняя и мелкая
- **Инфракрасный свет фокуса** - Матрица светодиодная - фокусирующая выпуклая линза о Вакуумный массаж. Два режима работы: циклическая работа и высокочастотная вибрация. Нет ни покраснений во время процедуры, ни времени восстановления после лечения.
- **Механические ролики** - 2 моторизированных ролика активно массируют кожу.
- **Два диска с УЗ**, которые обеспечивают двухстороннюю обработку зоны, в сочетании с тремя видами глубины RF позволяет достичь максимального эффекта.



Биполярный RF

3 частоты RF
Регулируемая глубина проникновения:
глубокая, средняя, мелкая




Инфракрасный
свет фокуса

Матрица светодиодная
с фокусирующей выпуклой
линзой



Вакуумный
массаж

Два режима работы: циклическая
работа и высокочастотная вибрация
Процедура **БЕЗБОЛЕЗНЕННА!!!**
Реабилитационный период отсутствует!

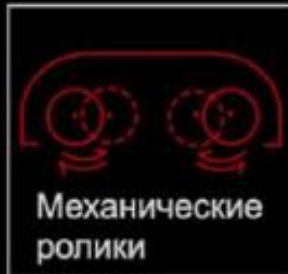

Механические
ролики

Два механических моторизированных
ролика активно массируют кожу и
разбивают жировые отложения



Фокус RF &
кавитация

УЗ-кавитация нового поколения:
автоматический пульсирующий захват
складки и двусторонняя обработка
зоны позволяет одновременно
разрушать жировые клетки и
обеспечивать дренаж - полная
безопасность клиента гарантирована!

МАНИПУЛЫ И ФИЛЬТРЫ

- Функциональный и эффективный аппарат, не только превосходно выполняет свои функции, но и удобен в использовании.
- Новая технология позволяет экономить бюджет, не снижая при этом уровень качества. 4 вида манипул оснащены **автоматической системой самоочистки**. Каждая манипула имеет свое назначение и зоны обработки, как представлено ниже. Но и это не все, теперь в аппарате имеется съемный фильтр, который можно промыть и установить самостоятельно. Все это облегчает работу с аппаратом и дает возможность работать с большим количеством клиентов, не затрачивая время на лишние манипуляции.
- Важным преимуществом аппарата является съемный промываемый фильтр. Удобный и простой в использовании.

манипулятор

технология

зона обработки

№.1



Рука, Нога, Плечо

№.2



Живот, Талии, Спины, Бедро, Ягодица

№.3



Лицо, Шея, Глаз

№.4



Живот, Талии, Спины, Бедро, Ягодица



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕДУР

Благодаря такому комбинированному воздействию значительно активизируются обменные процессы во всех слоях кожи и подкожно-жировой клетчатке.

Массажные ролики в сочетании с вакуумным воздействием массируют кожу, благодаря такому воздействию происходит проникновение тепла и энергии в дерму и гиподерму, улучшается циркуляция крови.


Благодаря воздействию инфракрасного тепла (ИК) и высокочастотного RF тока, происходит насыщение крови кислородом, активизируется метаболический распад жира, это приводит к уменьшению объема жировых клеток устранению эффекта «апельсиновой корки», подтяжке кожи и улучшению ее тургора.



ПРЕИМУЩЕСТВА КОМБИНИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ



1. Инфракрасный лазер уменьшает сопротивляемость кожи благодаря нагреву, а энергия RF глубоко проникает в соединительную ткань.
2. Синергетическое сочетание инфракрасного лазера и RF-прогрева увеличивает энергетический обмен в тканях и насыщение клеток кислородом благодаря прогреву.
3. Вакуум и специально разработанные ролики в манипуле позволяют глубоко проникать энергии RF в ткани (на глубину от 5 до 15 мм). В тоже время вакуум и механическое воздействие роликов массируют ткани, эффективно расщепляют подкожный жир, а также экстрадируют капиллярные сосуды, усиливают лимфодренаж, улучшают обмен веществ и уменьшают размер жировой ткани и значительно улучшают контуры тела.
4. Технология формирования кожной складки с помощью вакуума позволяет энергии RF глубоко проникать в кожу. Благодаря этому энергия RF воздействует только на кожную складку при этом достигается отличный лечебный эффект даже в области век. А так же обеспечивается безопасность лечения.

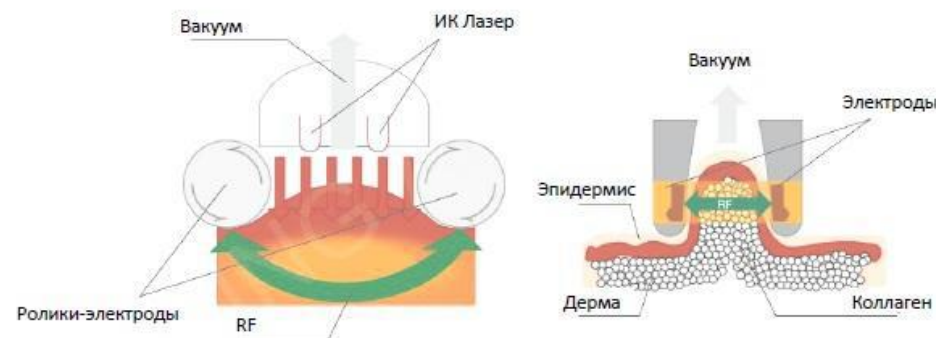




МАНИПУЛА ПО ЛИЦУ



Манипула включает 3 сменные насадки:

- Малая для зоны вокруг глаз (Вакуум + RF)
- Средняя для лица (Вакуум+ RF + IR)
- Большая для лица и зоны декольте (Вакуум+ RF + IR)



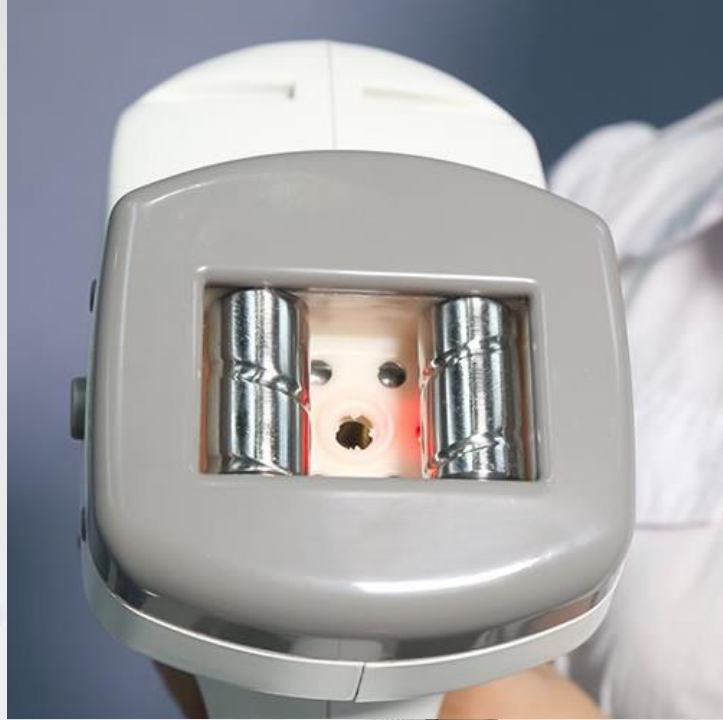

МАНИПУЛА ПО ТЕЛУ 1

Манипула включает 4 силы воздействия:

- Вакуум
- IR
- RF
- Автоматические роллеры

Управление происходит с экрана аппарата или можно осуществлять управление на манипуле



MIDIS

MIDIS



МАНИПУЛА ПО ТЕЛУ 2

Манипула включает 3 сменные
наконечника разного диаметра:

- Малый для зоны рук / декольте
(RF + IR + Вакуу)
- Средний для зоны рук / живота /
голень (RF + IR + Вакуу)
- Большой для зоны бедер/ ягодиц
(RF + IR + Вакуу)





МАНИПУЛА КАВИТАЦИИ



Манипула снабжена:

- ✓ 2 датчика УЗ кавитации
- ✓ Вакуумом
- ✓ RF

Датчики УЗ кавитации находятся под безопасным углом, позволяющий работать даже с зоной живота и низким уровнем ПЖК.



МАНИПУЛА КАВИТАЦИИ


Встроенный экран с возможностью регулировки всех параметров

Большой запас по мощности УЗ-кавитации до - 60 Ватт

Вакуумный пульсирующий захват складки

Два диска с УЗ-кавитацией, которые обеспечивают двухстороннюю обработку зоны под нужным углом и позволяют не затрагивать внутренние органы

Полная бесшумность работы ультразвука



MIDIS



ПРЕИМУЩЕСТВА V8C2

- ✓ автоматическая система очистки манипул
- ✓ наличие съемных промываемых фильтров
- ✓ тихий в работе (уровень шума не более 55дБ)
- ✓ руссифицированное меню
- ✓ разные манипулы для конкретных зон
- ✓ применяемые технологии являются неинвазивными
- ✓ широкая область применения
- ✓ быстрое достижение высоких показателей
- ✓ лечение абсолютно безболезненно и комфортно
- ✓ видимый результат после первой процедуры
- ✓ нарастающий эффект по мере прохождения курса процедур
- ✓ осязаемое уменьшение объемов тела
- ✓ ярко выраженный лифтинг кожи лица и тела
- ✓ стойкие полученные результаты



СИСТЕМА ОЧИСТКИ

Функциональный и эффективный аппарат, не только превосходно выполняет свои функции, но и удобен в использовании.

Новая технология позволяет экономить бюджет, при этом не снижая уровень качества. 4 вида манипул оснащены **автоматической системой самоочистки**. Каждая манипула имеет свое назначение и зоны обработки, как представлено ниже. Но и это не все, теперь в аппарате имеется съемный фильтр, который можно промыть и установить самостоятельно. Все это облегчает работу с аппаратом и дает возможность работать с большим количеством клиентов не затрачивая время на лишние манипуляции.

Важным преимуществом аппарата является съемный промываемый фильтр. Удобный и простой в использовании.



Установка для фильтра и чистки



Уровень 1: Во время чисток, Можно хранить сточные воды в **бутылках**, чистить 1 раз в месяц, помогает очистить трубку.



Уровень 2: **SMC фильтры** поглощают избыток масла. Съемный индикатор, легко менять и многоразовый.



Уровень 3: **Сепаратор** предотвращают попадание масла в оборудование. Бесшумно работа



+ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Вакуум, абсолютное давление: 90кПа – 25кПа (68,4Hg-19Hg)

Вакуум, Относительное давление: 10кПа-75кПа (7,6Hg-57Hg)

Вакуум, тип работы: 1-8 сек циклическая работа и высокочастотная вибрация

RF, мощность: 150Вт (максимум)

RF, частота: 3 частоты RF

RF, глубина проникновения: глубоко/средний/мелкий **RF, тип выхода:** ролики №1 и №3, диски №4

Кавитация, частота: 60Кгц **Кавитации, мощность:** 60Вт (максимум)

ИК лазер, длина волны: 850нм **ИК лазер, мощность:** 16Вт №1, 40Вт №2

Тип выхода: сфокусированная выпуклая линза

Мощность роликов: 4Вт (максимум)

Скорость вращения роликов: 15/мин постоянно

Дисплей основной: цветной сенсорный, 10.4" TFT

Дисплей манипулы №2 и №4: цветной, 2.4" **Размер упаковки:** 620смх520смх1600см.

Вес брутто: 50кг

Номинальное входное напряжение: AC220V±10%,50Hz/AC110V±10%, 60Hz

КОНТАКТЫ



«Центр Медицинской Косметологии «Мидис»»


Сайт: <http://www.midis-centr.ru/>

Телефоны:

+7 (495) 259-55-09

+7 (916) 112-54-89

Адрес: Москва, Павелецкая набережная, д.2, стр.2, БЦ "LoftVille"

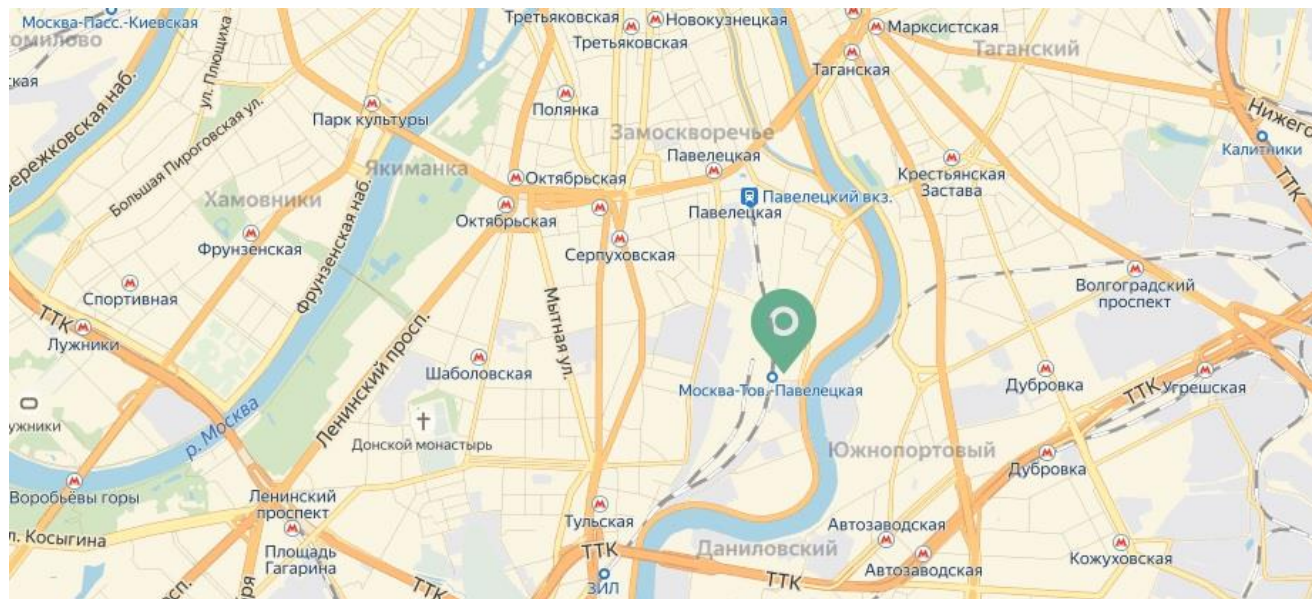

Все материалы презентации: включая текстовую, графическую и видео информацию, структуру и оформление страниц, защищены российскими и международными законами и соглашениями об охране авторских прав и интеллектуальной собственности (статьи 1259 и 1260 главы 70 "Авторское право" Гражданского Кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 года N 230-ФЗ). Все материалы запрещены к копированию!



Центр МИДИС
Эксклюзивный
Дистрибьютор
Оборудования для
Салонов красоты и
Центров эстетической
Медицины

С 1991 года

ОБУЧЕНИЕ

СЕРВИС

РАССРОЧКА

ПОДДЕРЖКА